


小型基板用スライドホルダー


2022年10月6日

【企画趣旨】


- ご好評いただいている「ファインクリスタルカッター」ですが、小型の基板をさらに小さくカットされる方には、調整が難しいというお声を頂戴しておりました。
- 今回、10mm x 10mmや5mm x 5mmなどの小型基板を切断するための補助ホルダーを製作いたしました。
- 使い方は、ベースマグネット部とスライド部の分離式で、ノギスの様に小型基板を挟みホールドし、さらに両サイドから本体付属のマグネット基板ガイドで両サイドから挟み固定します。
- スライド部は厚み0.2mmと薄くしてありますが、さらに幅6mm奥行4mmの溝が切っており、切断時の刃の干渉を防ぎます。

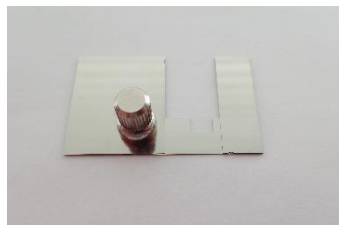


オープン時

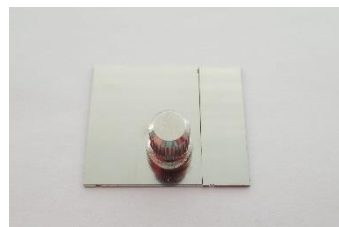

収納時

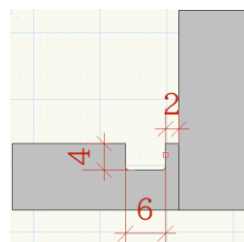

溝部の寸法

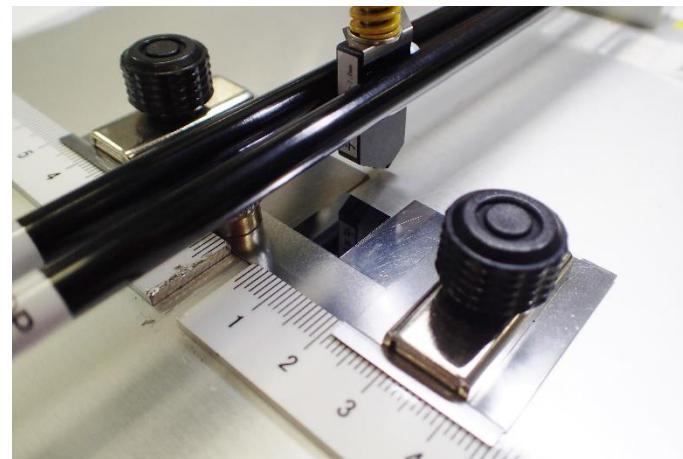

使用時のイメージ

(画像の商品は試作時の溝の無いタイプです)



Crystal Base
クリスタルベース